CENTRELEC Techniform

NOTICE DE MONTAGE DU FAUTEUIL SUBTIL

Poids maximum utilisateur 110 kg, pour usage domestique uniquement.


2 pers. | 15 min

PIÈCES /

Ax2 **Bx2** **Cx8**



Dx4 **Ex1**

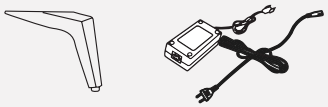


Fx1



ASSISTANCE MONTAGE : 02.54.37.65.27

1

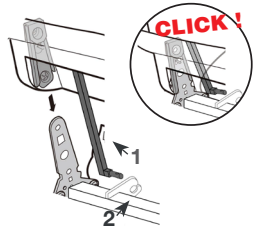


Enclenchez le dossier dans la partie basse de votre fauteuil ou canapé.

Attention, lorsque vous l'enclenchez, vous devez vous assurer que la partie 1 soit derrière la partie 2.







2

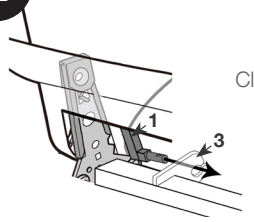

Clipsez la partie 1 dans la partie 3.


Ajoutez la rondelle en plastique sur la partie 1.

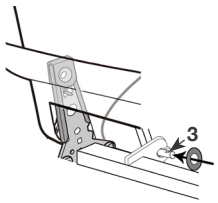

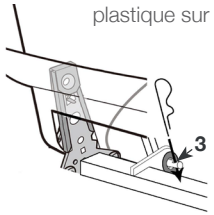


Ajoutez la goupille sur la partie 1.


3

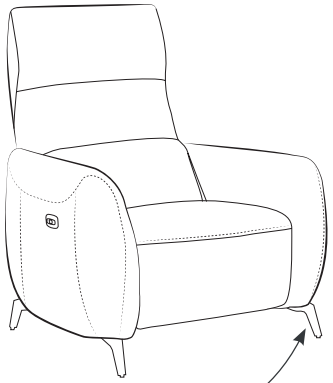


Fixez les 4 pieds.
Pieds **D**, visses **C**.

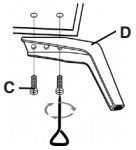

4

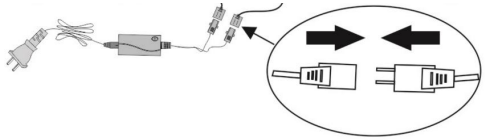

Branchez votre fauteuil sur l'alimentation choisie (secteur ou batterie).

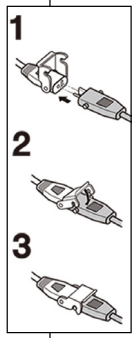

47 Rue Lionel Bordessolles - 36300 LE BLANC - Tél : +33(0)2.54.37.65.27 / Email : contact@centrelec.fr / Site / www.centrelec.fr
S.A.R.L. au capital de 186.600,00 Euros - R.C Châteauroux 92B168 - NAF 4652Z - SIRET 38821050200026