
CENTRELEC Techniform

NOTICE DE MONTAGE FAUTEUIL PIVOTANT MONA

Poids maximum utilisateur 110 kg, pour usage domestique uniquement.


2 pers. | 15 min

PIÈCES /

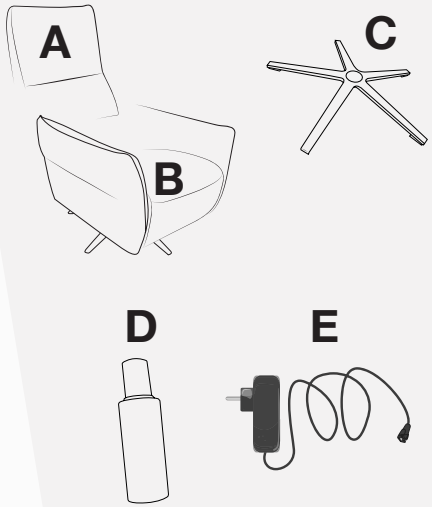


ASSISTANCE MONTAGE : 02.54.37.65.27


1 Installez l'arbre cylindrique sur le pied pivotant.

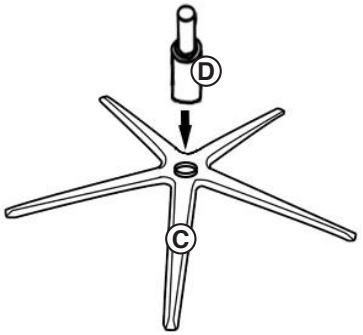


2 Installez l'assise du fauteuil sur l'arbre cylindrique.

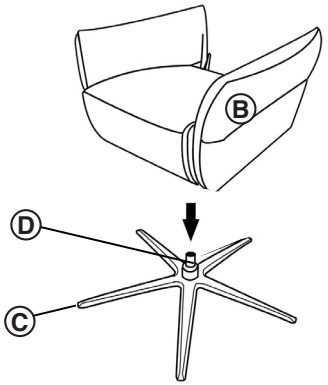

3 Assemblez 2 parties avec un scratch.

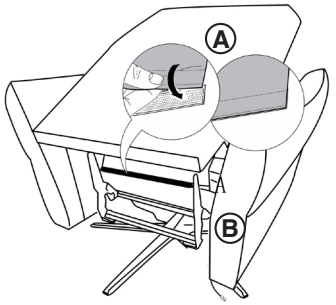

4 Clipsez le dossier sur l'assise.

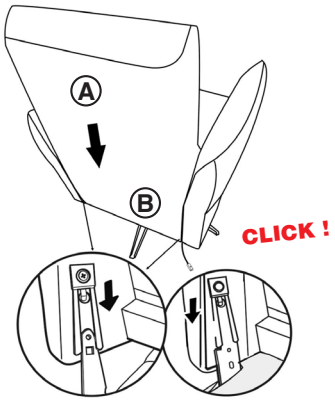


5 Couchez votre fauteuil pour une meilleure visibilité du mécanisme.



Veillez à bien vérifier que votre pied étoile soit correctement mis en place

6 Branchez votre fauteuil sur l'alimentation choisie.

(secteur ou batterie)

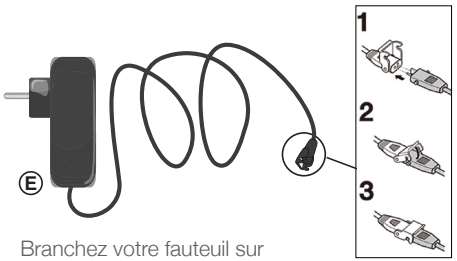

Branchez votre fauteuil sur l'alimentation choisie (secteur ou batterie).

AVEC *OPTION* BATTERIE

Clipsez votre batterie sur le support dédié se trouvant sous le fauteuil.

47 Rue Lionel Bordessolles - 36300 LE BLANC - Tél : +33(0)2.54.37.65.27 / Email : contact@centrelec.fr / Site / www.centrelec.fr
S.A.R.L. au capital de 186.600,00 Euros - R.C Châteauroux 92B168 - NAF 4652Z - SIRET 38821050200026